

酸素チューブ交換手順

酸素を酸素ポンベから中央配管につなぎかえるときの手順

移動のため酸素の器具をかえるときは、患者の移動前に酸素の切りかえを実施する

●酸素ポンベ⇒中央配管●



中央配管を開ける

中央配管のコックをあける
酸素カードを確認し
指示量の酸素を流す



接続をつなぎかえる

酸素ラインをポンベから中央配管へつなぎかえる
このとき酸素チューブにねじれがないか
患者までラインをたどって確認する



○ポンベを閉める

酸素ポンベを閉める
患者をベッドへ移動させる

●酸素ポンベの取り扱い●

従来の圧力調整器の場合



ポンベを台車に
固定する



パッキンに不具合はないか、油分、異物の付着はないか確認



流量計を取り付ける スパナで固定する




バルブのハンドルはゆっくり開ける
全開したあと半回転戻す

患者の酸素を中央配管から酸素ポンベに切りかえるときは逆の手順となる。

- ①酸素ポンベの酸素を指示量流す
- ②酸素ラインをつなぎかえる
- ③中央配管の酸素のコックを閉じる

●カルミアGの取り扱い● アラーム付き酸素流量調整器

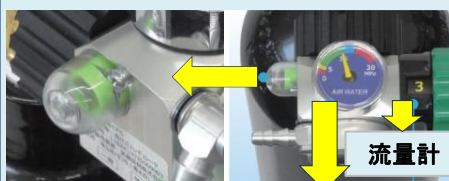

フローインジゲーター
ポンベからの酸素の流れが目視できる

圧力計
ポンベの交換時期を音で知らせる

取り付けは片手でしっかり回しこむ。スパナなどは不

