

シリンジポンプの危険



シリンジポンプは、輸液ポンプよりも微量の流量設定が可能で、流量精度がより高いので、厳密な速度管理を必要とする患者に使用される。

★ サイフォニング現象

 シリンジポンプの位置が患者さんより高い位置に設置され、シリンジの押し子が、何らかの原因できちんと固定されていないとき、薬液が急速に注入される現象。

押しこはずれは、どんなときに起こりやすいか？

①あわててシリンジを更新したとき ②患者移送などで、シリンジポンプをスタンドに移し変えるとき ③何らかの外力がかかったとき

- 押しこはずれの危険性を常に意識して観察する。
- シリンジポンプの高さは、患者が臥床している高さと同様にする。

微量注入が可能なシリンジポンプは、濃い薬液がセットされているので、急速注入の結果は重大、命にかかります。いつも自分の目で、適切にセットされているか確認します。

●シリンジポンプ使用時の注射ラベルの貼り方

シリンジポンプ使用時はラベルが2枚、薬局から薬剤とともに上がってくる、患者


＜注射ラベルの貼付方法＞

①赤点線を折り
貼り合わせる

②注射ラベルを注射器に貼付する

折り山を1mmの目盛を目安に合わせラベルを貼る

ラベルの折り山をこの目盛りに合わせて貼るのがポイント

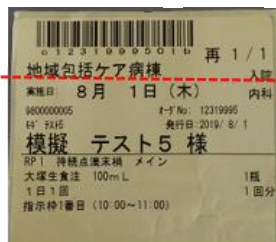

ラベルの端はシリンジの縁に合わせる



◎シリンジポンプにラベルを貼る理由

注射器のセット状態によっては、薬剤投与時、注射器本体の注射ラベルでは指示時間や薬剤名の確認がしづらい為